

一、 连接主机




如上图将电源适配插入主机的输入口，**请不要先将专用导线插入主机的输出口，等到设置好APP后再将导线插入主机输出口。**


二、 将颈部止汗装置湿水

请将颈部止汗装置用水浸湿（松紧带请不要湿水），饱含水且不滴水；

三、 安装颈部止汗装置

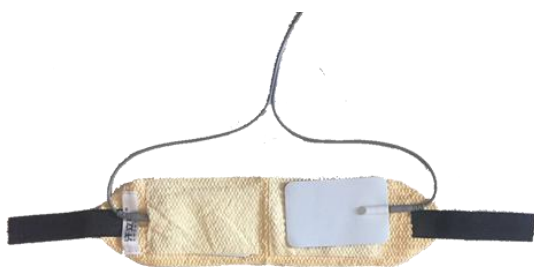

图一将电极从上往下放入装置口袋

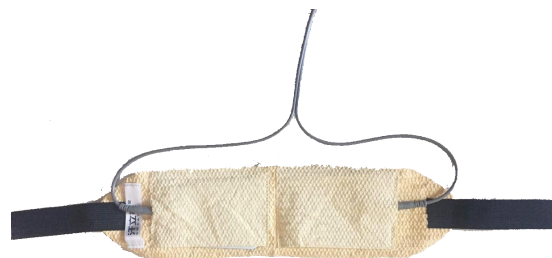

图二将导线从侧面插入电极孔

如上图所示，将软胶电极白色部分朝外，黑色部分朝内，软胶电极插孔朝向两侧缝口处插入颈部止汗装置两侧口袋，将导线从缝口处小孔插入软胶电极。

四、 佩戴颈部止汗装置



如上图，将颈部止汗装置通过装置上的松紧带和魔术贴绑到颈部，如需调节位置，可以根据需要自行转动本装置到适合的位置。

五、 安装APP

（如果已经下载安装过APP请直接到步骤八）用户扫描右图二维码（建议用带扫描功能的手机浏览器扫描），下载相应的苹果iOS或者安卓Android汗立克APP应用：



六、 运行汗立克APP

点击如右图所示汗立克APP图标即运行APP。

七、 用户注册

用户通过手机号以及手机验证码注册。



八、 登录APP

注册登录后，进入汗立克APP首页（如图三所示），点击控制器进入控制器界面，如图四所示：



图三 汗立克APP首页



图四 控制器界面

九、开启主机

请将电源适配器接通电源，**长按PDB-100主机右上角电源开关3秒钟，主机打开，此时蓝牙指示灯闪烁，指示机器打开。**

十、APP连接主机

在APP控制器中，进入控制器界面。点击“连接蓝牙”，显示“连接中”，连通蓝牙后提示“蓝牙已连接”且蓝牙指示灯常亮、“开始止汗”，然后点击颈部模式，如右图：备注：蓝牙设备ID为：HC-08。

选中颈部模式之后，仍然可通过手动继续微调、修改止汗密度、电压、倒计时等参数，**首次使用建议将电压调至8或者更低的电压，颈部皮肤适应3-5分钟后再自行往上增加。**



图五 颈部模式

十一、开始止汗

参数设置完毕之后，**将连通颈部止汗装置的导线插入主机输出口**，主机检测到有皮

汗立克®智能脉冲离子导入止汗仪PDB-100颈部止汗快速上手指南

肤添加上之后，“开始止汗”指示灯变为常亮，开始止汗。此时，输出电压将以大约每秒1伏特的间隔逐渐增加至设定值。用户在此期间将感受一个非常舒适的电流增强变化。

在此止汗期间，用户可以将皮肤从颈部止汗装置脱开。当皮肤离开止汗装置的一刹那，偶尔会感觉有轻微的电流变化，这个变化没有什么影响，之后“开始止汗”指示灯灭掉变为灰色，同时倒计时暂停。

备注：当皮肤从止汗装置脱开时，建议将输出电压值调节为0。

当用户再次佩戴颈部止汗装置并连通导线至主机输出孔后，“开始止汗”指示灯将变为常亮。

当累计时间从1变为0时，输出电压开始逐步以大约每秒1伏特的速度逐步下降，直至最终下降为0。然后，系统弹出一个提示窗口如上图所示：“此次操作结束，请务必关闭主机电源，再次使用请重新上电并连接蓝牙。”轻按主机开关一下，即关闭主机电源，这样就结束一个基本的止汗操作。下次止汗则重复从上述步骤一开始。



图六 控制器界面

十二、开启语音模式（可选）

当蓝牙连接后，用户可以随时开启语音模式，该模式尤其对于双手止汗时提供最大便利，方便用户在对双手止汗时，不需要用手修改止汗参数，从而节省止汗时间、提高止汗效率，省却多次将手离开、再次浸入止汗水盘的麻烦。当左上角出现“开始录音”时，可使用以下说明书中表格1中语音指令进行操作。